

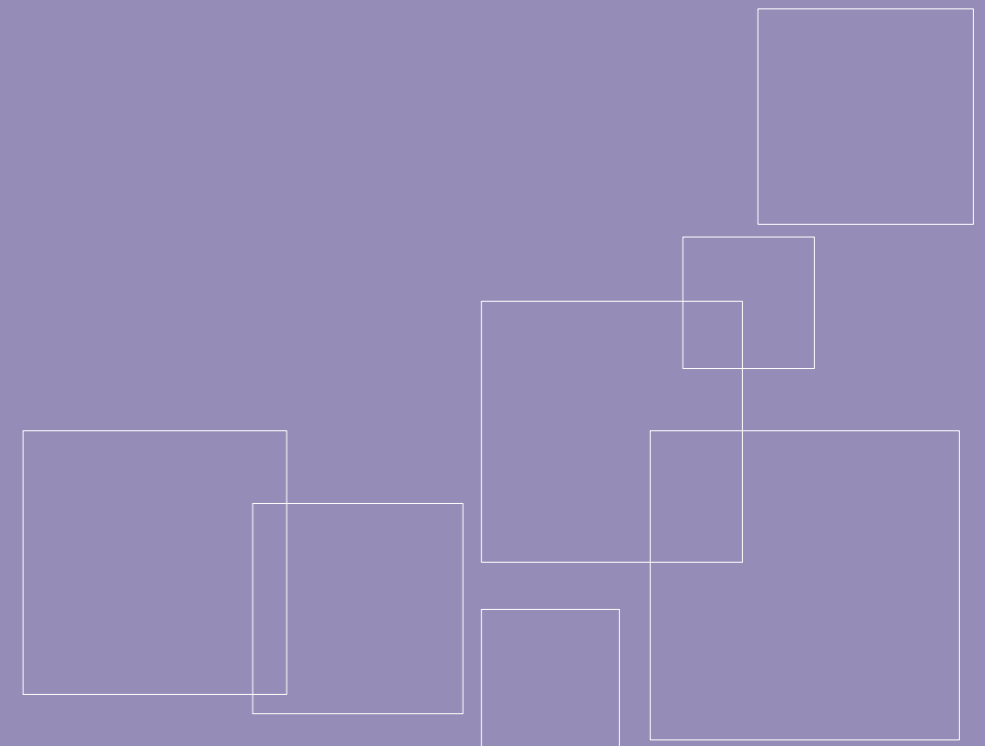


panel nadłóżkowy

MERYclassic

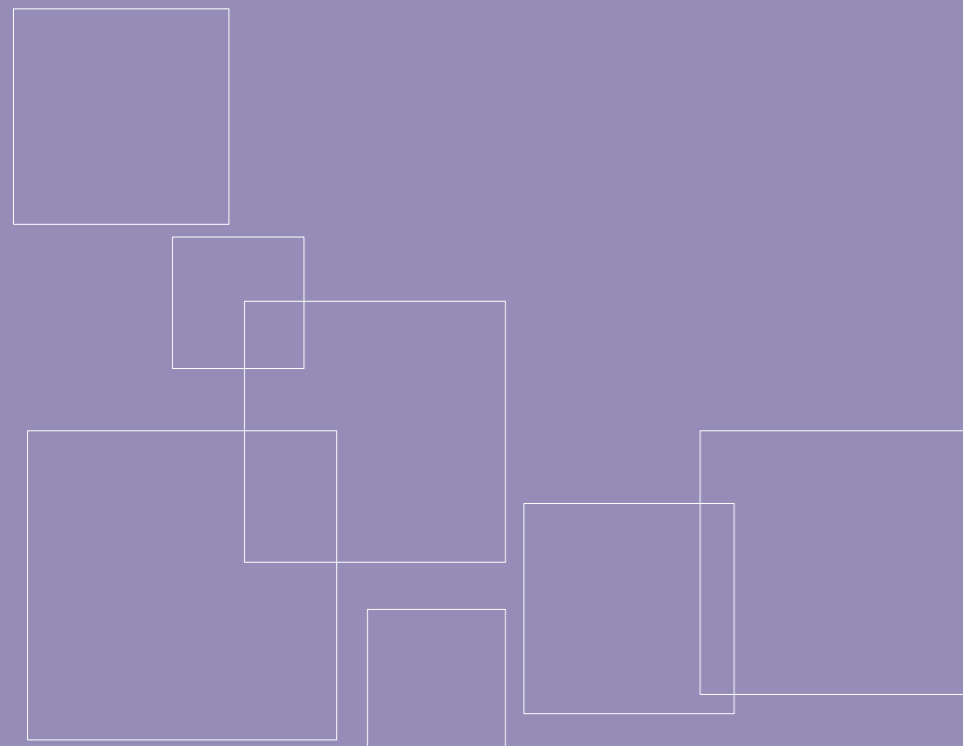

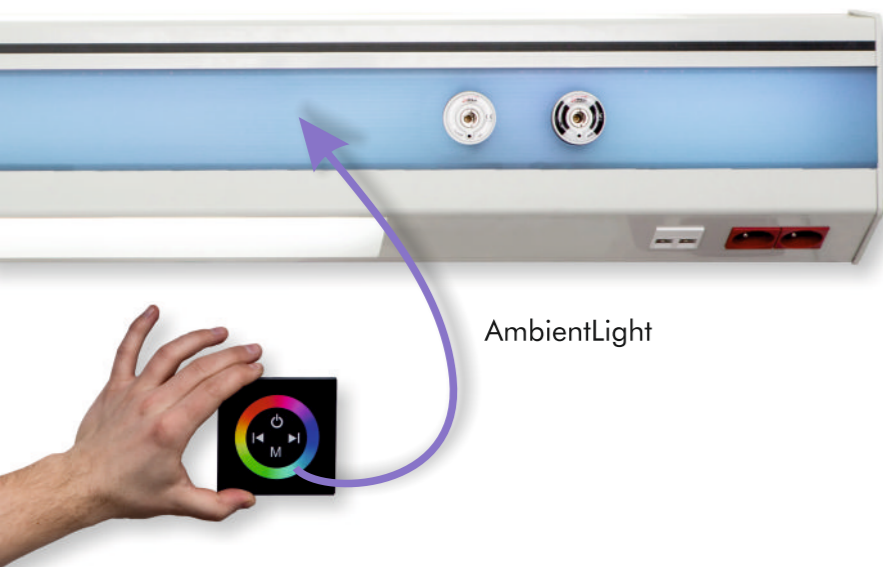

AmbientLight

klasyka gatunku

MERYclassic jest naszym pierwszym i sztandarowym produktem otwierającym rodzinę paneli nadłóżkowych MERY. Od prawie 15 lat udoskonalamy jego konstrukcję, jest już prawie idealna. W tym czasie jego wygląd, wielokrotnie był modyfikowany i ulepszany, żeby dziś pokazać Państwu jego najnowsze i najbardziej funkcjonalne wydanie. MERYclassic to najbardziej popularny i doceniony panel nadłóżkowy w polskich szpitalach. Jego wyjątkowe cechy użytkowe, w tym bardzo wydajne oświetlenie i ogromna elastyczność konfiguracji, stawiają ją wśród najlepszych produktów na rynku. Lata doświadczenia w produkcji paneli nauczyły nas, że oprócz najważniejszego końcowego odbiorcy, dla którego liczy się funkcjonalność, są też inne grupy, o które musimy zadbać. Prostota budowy oraz dogodny dostęp do mediów są istotą przy serwisowaniu przez obsługę techniczną gniazd gazów medycznych czy gniazd elektrycznych. Duża przestrzeń wewnątrz i ergonomiczne gospodarowanie kanałami, w których przebiegają instalacje, są cechą docenioną przez instalatorów. Połączenie powyższych elementów stawia MERYclassic wśród najlepiej dopracowanych i funkcjonalnych paneli nadłóżkowych na polskim rynku. O wartości wersji classic świadczy także popularność tego produktu liczona w ponad kilkunastu tysiącach sprzedanych stanowisk.







doświadczenie w doskonałości

MERYclassic jest popularną, ergonomiczną konstrukcją będącą wyrobem medycznym klasy IIb, wykonaną z profili aluminiowych. Niniejszy produkt w bardzo szerokim zakresie wykorzystywany jest w zwykłych pokojach łóżkowych pacjentów. Panel posiada praktycznie nieograniczone możliwości konfiguracyjne pod kątem typów i rodzajów punktów poboru gazów medycznych, gniazd teletechnicznych i elektrycznych, a także wyposażenia dodatkowego m.in.: AmbientLight, HandsFree czy ControllLight. AmbientLight jest światłem, które jest zrealizowane wewnątrz standardowego klosza oświetleniowego, jak również przez iluminację przedniej pokrywy frontowej, z możliwością wyboru koloru RGB w czasie rzeczywistym. System HandsFree może załączyć światło górne i pacjenta za pomocą zaprogramowanych gestów, a ControllLight, steruje mocą tego światła poprzez manipulator systemu przyzywowego.

Konstrukcja paneli MERYclassic gwarantuje przyjemne oświetlenie sali światłem odbitym spełniając wszystkie aktualnie wymagane standardy. Dodatkowy wybór kąta górnej i dolnej powierzchni panelu, w której znajduje się klosz oświetleniowy, o wartościach 5° lub 25° zapewnia użytkownikowi dobór idealnie pasującego rozkładu światła. Produkt występuje w wersjach z kloszami mlecznymi i przezroczystymi o różnych parametrach transparentności, a aluminiowe odbłyśniki zapewniają najwyższe skuteczności świetlne opraw, dające dużą ilość światła przy minimalnym zużyciu energii.

Najczęstsze wyposażenie na salach pacjentów:

- oświetlenie ogólne np. T5, 2G11 oraz T8 o mocy pojedynczej świetłówki od 13W do 2x80W lub pełne oświetlenie LED wszystkie zamocowane na polerowanym asymetrycznym odbłyśniku,
- oświetlenie miejscowe/do czytania np. T5, 2G11 oraz T8 o mocach najczęściej od 18W do 36W lub pełne LED,
- oświetlenie nocne LED od 0,6W do 5W (ewentualnie świetłkowe),
- punkty poboru gazów O₂, AIR, VAC wg specyfikacji Użytkownika,
- gniazda elektryczne - dostępne różne kolory, nabudowane lub licowane moduły 45x45, opcjonalnie z sygnalizacją fazy,
- punkty wyrównania potencjału,
- przygotowanie pod instalacje niskoprądowe Użytkownika (np. RJ45, RJ12 itp).
- przygotowanie pod dowolne systemy przyzywowe,
- możliwość zabudowy w profilu o przekroju 3-, 4-, lub nawet 5 kanałowym z możliwością montażu dodatkowego osprzętu np. do szyny do podwieszania wyposażenia medycznego itp.



dopasowanie

Każdy z paneli nadłóżkowych może być wykonany w wersji wielostanowiskowej integrując źródła gazów medycznych i instalacji elektrycznych w jednym miejscu. Z punktu widzenia ergonomii oraz przyjętego standardu długość jednego stanowiska MERYclassic to 1,6m, wersje wielostanowiskowe są wielokrotnością tej wartości. Oczywiście długość może być dobrana indywidualnie.

MERYclassic w standardzie składa się z trzech odseparowanych od siebie kanałów. Dwóch zewnętrznych kanałów oświetleniowych i elektrycznych oraz środkowego kanału podzielonego poziomo, w którym prowadzone są rury gazów medycznych. Zastosowanie dwóch kanałów środkowych, w tym jednego otwartego, prowadzenie instalacji między panelem, a ścianą jest niezwykle proste i nie wymaga szczególnej precyzji. Właśnie za to MERYclassic jest ceniona wśród instalatorów, ponieważ pasuje zawsze do wykonanej instalacji.

