



panel ścienny

**MERYwall**

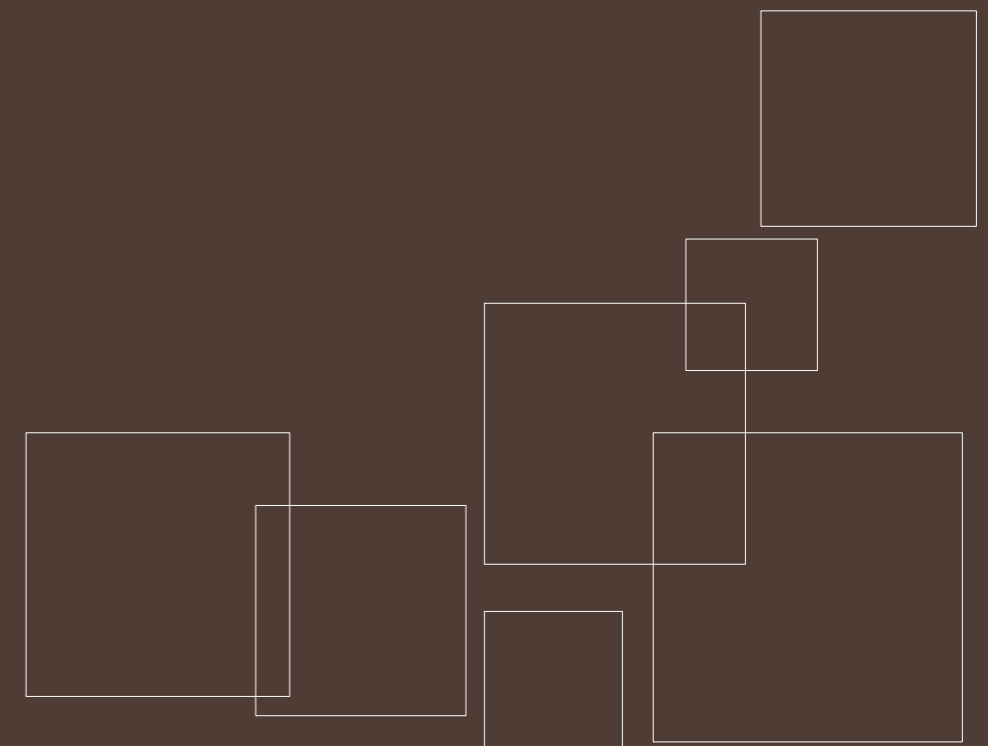

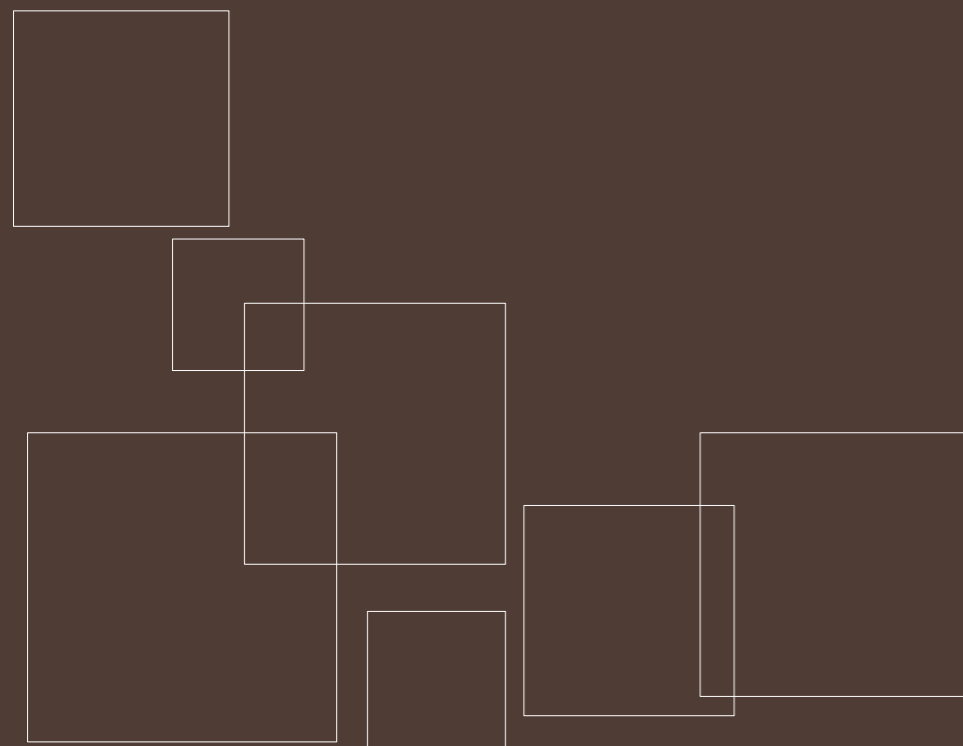

## inspiracja przyszłości

Byliśmy wyjątkowo zaskoczeni z połączenia dwóch światów: funkcjonalności i piękna. Szukając inspiracji, wkroczyliśmy w miejsca, które dotychczas nie były dostępne w naszych produktach. Wykorzystanie faktury drewna, bardzo rzadko stosowanego w wyrobach medycznych i popularnego aluminium okazało się być wyjątkowym zestawieniem, pozwalając pacjentowi choć na chwilę zapomnieć, że znajduje się w szpitalu. Jednostki zaopatrzenia MERYwall wpisują się w nowoczesną i klarowną filozofię tworzenia wyjątkowych rozwiązań w salach pacjentów. Ogromny zakres kolorystyczny i funkcje ergonomiczne dają nam nie tylko powód do dumy, ale także satysfakcję, z jaką spoglądamy na nowocześnie zaprojektowane sale pacjentów.

MERYwall to przede wszystkim połączenie długiej tradycji i doświadczeń firmy INMED z wizją przyszłości.



## perfekcja światła

*„Nie bój się cieni. One świadczą o tym, że gdzieś znajduje się światło”*

Oscar Wilde

Światło pobudza naszą wyobraźnię, pokazuje nam miejsca, których często nie dostrzegamy. MERYwall jest wyjątkowym połączeniem światła, jako elementu funkcjonalnego i dekoracyjnego. Nie chcemy już dłużej, aby światło było tylko elementem technicznego wyposażenia, chcielibyśmy, aby światło było perfekcją.

Nasz produkt opiera się o estetyczną, poziomą oprawę oświetleniową z szczotkowanego aluminium, która idealnie pasuje do pozostałych elementów wyposażenia. Źródłem światła są m.in. fluorescencyjne świetlówki liniowe uruchamiane elektronicznym balastem. Dzięki niepełnej separacji światła dolnego i górnego uzyskaliśmy dodatkowy, wyjątkowy efekt wizualny. Natężenie światła w oprawie można dobrać indywidualnie, podobnie jak sposoby jego włączania. Innym wyjątkowym rozwiązaniem jest sterowanie, w szerokim zakresie, natężeniem światła np. przy pomocy manipulatora dla pacjenta. AmbientLight, który znajduje się w obrysie produktu, cechuje nie tylko unikalny design, ale także wyjątkowa funkcjonalność technologii LED. Dzięki temu oświetleniu, pacjent może spokojnie odpoczywać przy delikatnym, ciepłym, rozproszonym świetle, którego źródło jest poza zasięgiem jego wzroku.



Pełne oświetlenie



Lampa pacjenta



AmbientLight









## barwy

Konfrontacja kolorystyki z higieną i bezpieczeństwem była wyjątkowym wyzwaniem. MERYwall wykonaliśmy z niezapalnej płyty laminowanej w klasie B reakcji na ogień lub Corian® firmy DuPont®. Bardzo szeroka gama tekstur i strukturovani powierzchni gwarantują najlepsze dopasowanie do indywidualnych gustów najbardziej wymagających użytkowników. Każda z płyt oprócz doskonałych właściwości stylistycznych oraz ognioodporności, posiada także atest higieniczny w klasie E1. Wyroby znajdujące się w tej klasie cechuje przyjazność dla środowiska i ludzi, ponadto są rekomendowane do wykorzystania w służbie zdrowia.

Jeśli stylistyka pomieszczenia nie zawiera elementów o strukturze drewna, proponujemy Państwu kolejne unikalne rozwiązanie materiał Corian® firmy DuPont®. Równoważąc piękno i najwyższy stopień wytrzymałości Corian® znakomicie nadaje się do innowacyjnych i wymyślnych kreacji mających służyć przez wiele lat. Idealnie gładki, polerowany na wysoki połysk, bez widocznych łączeń, często używany w zabudowie sal operacyjnych, tym razem może zagościć w salach pacjentów.

Poniżej znajdą Państwo kilka przykładowych wzorów i barw z naszej kolekcji

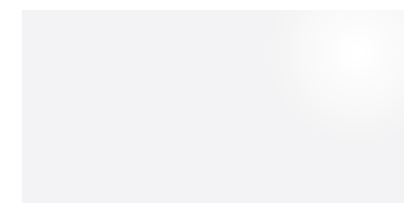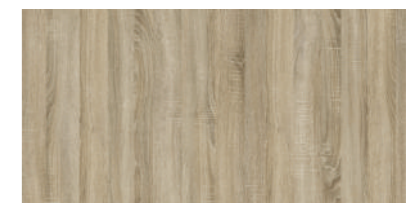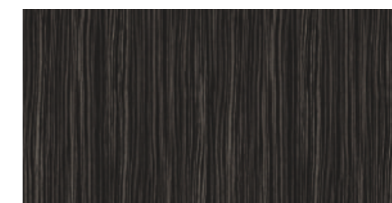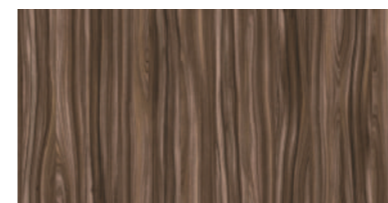

## elastyczność rozwiązań

Dostarczenie energii elektrycznej oraz dostęp do źródeł gazów medycznych w przypadku MERYwall jest wyjątkowo prosty. Na dekoracyjnej płycie drewnianej, wykonanej z ogniotrwałych materiałów lub płycie Corian® znajduje się specjalny mBOX, składający się z trzech niezależnych kanałów, do których podłączane są wszystkie media. Dla lepszej organizacji mediów, podzieliliśmy kanały na część dla przewodów elektrycznych zasilających gniazda sieciowe oraz włączniki oświetlenia, część z wyprowadzonymi punktami poboru różnych gazów medycznych oraz część dla instalacji teleinformatycznych. Każda z branż, ma swoje miejsce, z łatwym dostępem, a także z możliwością montażu własnych akcesoriów.

MERYwall nie tylko integruje media w jednym miejscu, ale także zapewnia łatwy dostęp do wszystkich akcesoriów wykorzystywanych przez Pacjenta czy personel medyczny. Płyta frontowa mBOX wykonana jest ze szczotkowanego aluminium, ale tylko wyobrażenia ogranicza inne technologie jej wykonania.



## dopasowanie

Indywidualność każdego z rozwiązań jest charakterystyczna dla linii MERYwall. Kolorystyka, wyposażenie i kształt mBOXów lub światło każdemu pomieszczeniu nadadzą wyjątkowy i unikalny nastrój. Mnogość konfiguracji ograniczona jest jedynie wyobraźnią projektanta. Praktycznie, każdy z elementów wyposażenia dodatkowego np.: elementy łóżek, krzesła, meble mogą zostać wkomponowane w filozofię MERYwall, dając jeszcze lepsze wrażenie dopasowania.

MERYwall przeznaczona jest zarówno do montażu dla indywidualnego stanowiska łóżkowego jak i wielokrotnych stanowisk, dostarczając nie tylko nowe wrażenia stylistyczne, ale także wysoki poziom estetyki i ergonomii. Wysoka jakość użytych materiałów zapewnia utrzymanie najwyższego standardu otoczenia pacjenta przez wiele lat.

